


CHALECO DE EXTRICACIÓN para pacientes adultos

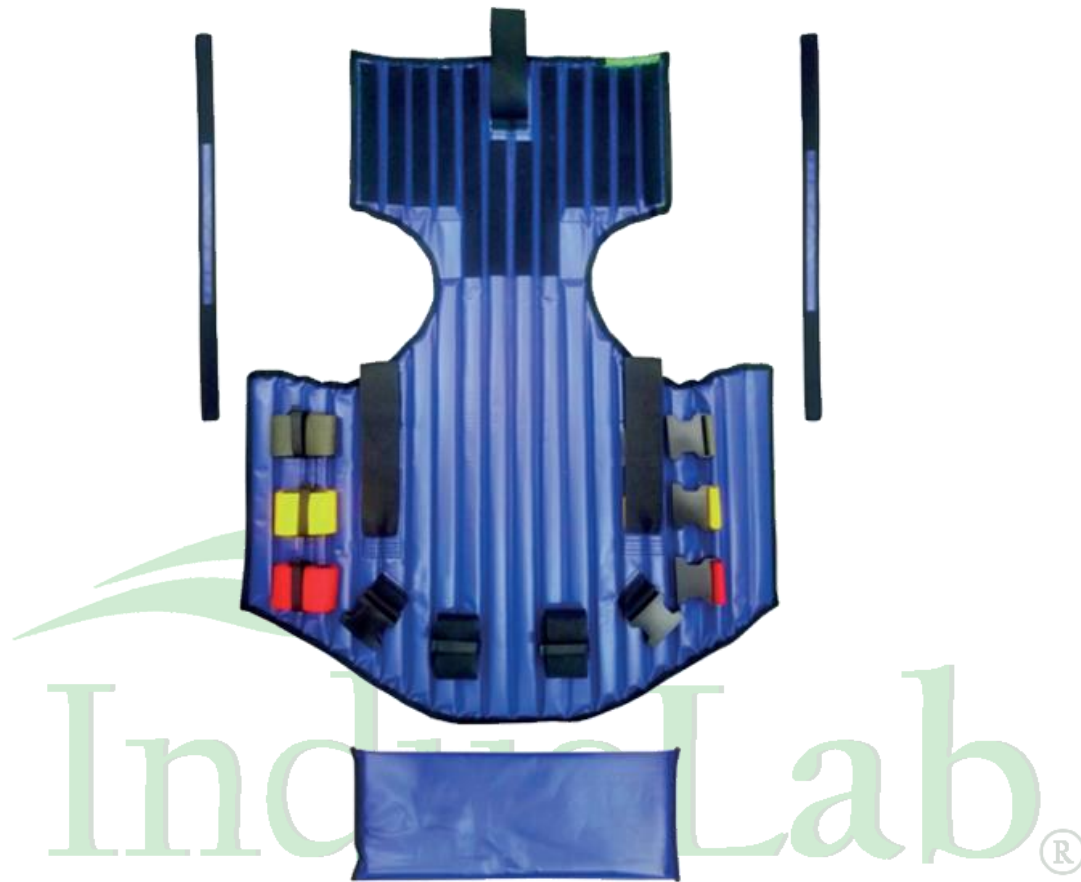

Indicado especialmente para la extracción de un paciente adulto o niño mayor atrapado, permitiendo la inmovilización en bloque de la cabeza, cuello y tronco.

Es un chaleco semirrígido construido con bandas rígidas de madera colocadas paralelamente en posición vertical sobre una funda plástica permitiendo la suficiente flexibilidad horizontal para abrazar la cabeza y tronco del paciente, pero, a su vez, manteniendo la rigidez vertical necesaria para ofrecer un apoyo seguro para la columna vertebral.

La fijación del chaleco se realiza mediante tres cinturones codificados por colores y cintas de velcro que garantizan una perfecta inmovilización.

Posteriormente a la extricación del paciente con el chaleco inmovilizador, se colocará sobre un tablero espinal o camilla de cuchara sin necesidad de retirar este dispositivo.



El dispositivo está construido con el nylon tri-laminado impletex de alta resistencia al desgaste. El dispositivo es 100% traslucido a rayos X, por lo que el paciente puede ser ingresado a la sala de rayos sin necesidad de sacarlo de la inmovilización.

- Incluye bolso de transporte y esponja anatómica.
- Peso: 3 Kg. aprox.



Bolso de Transporte



IndusLab®